


## 使用說明書

頭皮水療按摩儀  
Needle Head Spa Lift  
MS31N-HK

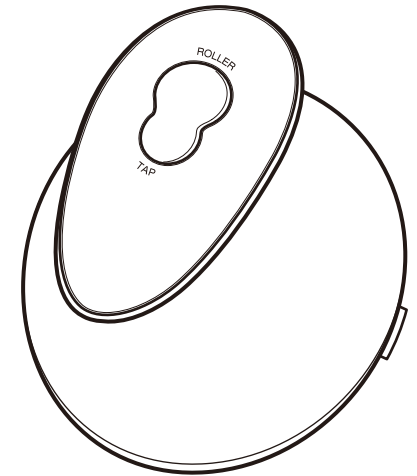

### 目錄

安全注意事項	1
在香港境外使用時注意事項	6
產品說明	7
使用前	10
護理方法	15
護理後	23
排除故障	26
售後服務	28
● 產品規格	29




衷心感謝閣下選購YA-MAN的產品。

● 為閣下安全著想，使用前請先仔細閱讀本使用手冊。

# 安全注意事項



- 請仔細閱讀所有安全注意事項內容，以確保能安全及正確地使用本產品。
- 請按照使用手冊的指示進行操作。
- 如護理時出現異常情況，請立即停止使用及聯絡經銷商。
- 如在故障狀態下使用，可能會對身體造成傷害或導致意外 / 危險，請務必停止使用。
- 此處的注意事項列明了與安全有關的重要內容，請務必遵守。
- 注意事項分為「危險」、「警告」和「注意」三類，明確說明誤用本機時可能發生的危險程度和損害。

## ● 注意事項分類

 <b>危險</b>	不正當使用本產品會引起嚴重傷亡事故。
 <b>警告</b>	不正當使用本產品可能引致嚴重傷亡事故。
 <b>注意</b>	不當使用本產品可能會導致人身傷害或財產損失*。

\*所謂財產損失，是指包括房屋、傢具以及家畜、寵物的損害。

## ● 標示符號

	此符號表示禁止進行的事項。
	此符號表示務必遵守的事項。
	此符號表示該小心注意的事項。

## 危險



禁止

### 以下人士切勿使用：

否則可能會導致醫療儀器故障。

#### ◆ 正在使用醫療儀器的人士，包括：

- 起搏器等體內植入式醫用電子儀器；
- 心臟起搏器等植於體內用的儀器，以及
- 心電圖描寫器等穿戴式醫用電子儀器



## 警告

### ● 請勿在以下情況下使用：

- 患有或疑似患有心臟病或相關疾病的人士
- 幼兒或無法正常表達意願的人士
- 無法感知溫度或刺激的人士 · 患有自身免疫性疾病的人士

### ● 在以下情況下，使用前請諮詢醫生：

- 患有急性疾病 · 患有傳染病 · 患有惡性腫瘤
- 患有發熱性疾病 · 患有高血壓或血液疾病 · 發燒
- 因糖尿病等高度慢性循環功能障礙而導致有感覺障礙
- 有神經損傷 · 患有皮膚病或異位性皮膚炎
- 定期就醫並且正在服藥
- 有過敏體質、接觸性皮炎、曾有皮膚相關病史或對皮膚有任何疑慮



禁止

### ● 對於以下身體部位，或存在以下狀況，切勿使用：

- 皮膚受損、出現皮疹、炎症或其他異常情況 · 受到酒精的影響
- 口腔內、陰部周圍或粘膜 · 眼球 · 眼瞼(眼周) · 喉嚨
- 凸起的痣 · 病毒感染性疣 · 骨折部位
- 醫學美容治療後出現內出血、腫脹或結痂症狀的部位
- ※醫學美容治療後2週內避免使用本產品。之後也請諮詢醫生並且只在獲得許可後才能使用本產品(例如注射透明質酸、注射矽膠、注射肉毒桿菌、埋線拉提、雙眼皮手術、HIFU等)
- 通過手術植入金屬的部位(重建手術、整形手術、整容手術等。)



禁止使用者

不要讓無法表達自己意圖的人士使用。避免兒童和肢體殘障人士使用。未成年人必須得到監護人同意並在監護人監督下使用。請將本機放置於兒童無法接觸的地方。請勿作遊玩之用。

否則可能導致意外或受傷。



禁止

請勿將手指放在操作中的機件之中。

否則手指可能會被機件夾住而導致受傷。



禁止其他用途

請勿用於使用說明書中記載以外的用途。

否則可能導致受傷或故障。



禁止使用已損壞插頭

請勿使用損壞的充電插頭或鬆動的電源插座。

否則可能會導致觸電、短路或火災。如需維修，請聯繫產品銷售商。



禁止拆解

請勿拆解、修理或改裝產品。

否則可能會導致火災、觸電或受傷。如需維修，請聯繫產品銷售商。

## 警告



**禁止  
不當處理**

請勿損壞、加工、扭曲或以其他方式對充電插頭施力。  
否則可能會損壞充電插頭並引起火災或觸電。



**禁止  
浴室充電**

請勿在浴室充電。  
否則可能導致觸電、短路或火災。



**禁止摔跌**

請勿將其放置在不穩定的地方。另外，請勿讓主機掉落或受到撞擊。  
否則可能導致受傷或故障。



**務必遵守**

如果在使用過程中感到疼痛、噁心或頭皮或皮膚有任何異常，請立即停止使用。  
如果頭皮或皮膚出現任何異常，請立即停止使用並諮詢醫生。



**務必遵守**

充電前確保充電端沒有沾濕。  
否則可能會導致觸電、短路或火災。



**禁止使用  
延長線**

請必需使用本產品的專用充電座。此外，將充電插頭直接插入牆上插座，不要使用電源拖板。  
否則可能會導致觸電、短路或火災。



**異味  
異常發熱時  
禁止使用**

如出現異味或異常發熱，請停止使用。  
否則可能會導致機件損壞或火災。



**務必遵守**

在臉上使用時，必需使用LO模式，並且不要用力按壓。  
否則可能導致意外或受傷。



**務必遵守**

請使用 100V 至 240V 交流電。  
將電源插頭穩固地插入。



**務必遵守**

請勿用於使用說明書中記載以外的用途。  
否則可能導致受傷或故障。

## 警告



**務必遵守**

閒置或清潔時，請先關閉電源。  
否則可能會導致觸電、短路或火災。



**拔除插頭**

萬一發生異常，請關閉主機電源。如充電時發生異常，請立即從插座上拔除充電插頭。  
當產品出現冒煙、異常噪音或氣味等異常狀態時，請勿使用該產品。



**拔除插頭**

從插座上拔除充電插頭時，請務必握住前端部分將其拔出。  
另外，手濕時請勿插入或拔除插頭。  
否則可能會導致觸電、短路或火災。



**生火注意**

請勿在火源附近、烈日下或多塵的地方使用或放置本產品。請勿將本產品投入火中、加熱、高溫或高壓下充電使用或存放。  
本產品內置充電式電池。  
否則可能會導致發熱、起火、爆炸或故障。

## 注意



**禁止**

以下人士請勿使用。  
可能會因頭髮纏結而導致頭髮受損。  
· 接受過植髮手術的人。  
· 戴假髮或頭髮貼片的人士(用膠貼固定、正使用駁髮造型等)。



**禁止**

請勿進行以下動作。  
否則可能會導致意外或造成問題。  
· 請勿用力按壓或快速移動刷子。  
· 請勿集中使用於一個地方。  
· 如果頭髮纏結，請關閉主機並先解開纏結的頭髮。



**禁止**

請勿與風筒一起使用，或用風筒吹乾主機。  
否則可能會導致主機變形或故障。

## 注意



禁止

請勿使用酒精、稀釋液、汽油或洗甲水等溶劑擦拭主機。

否則可能會損壞主機表面。



禁止

請勿將其浸於水中或浴缸中。

否則可能導致主機故障。



務必遵守

請遵照建議使用時間。每個部位每次使用約5分鐘，建議每天使用共20分鐘。使用於臉部時，全臉使用約5分鐘，使用於頭皮時，整個頭皮使用約5分鐘。

過度使用會損害皮膚和頭皮。



務必遵守

請勿在溫泉、桑拿或含有入浴劑的熱水中使用。萬一沾濕主機，請用水徹底沖洗。

否則可能導致出現異味、變色或故障。



務必遵守

使用前請檢查配件是否有刮痕或其他異常。

可能會導致受傷或故障。如使用時感到任何疼痛或異常，請立即停止使用。



務必遵守

使用本機時，請除下身上的配飾和金屬物品(手錶、項鍊、戒指、耳環)。

否則可能會導致配飾被夾住。



務必遵守

使用前請先清洗頭髮和頭皮，確保沒有殘留洗髮或護理產品。

否則可能導致主機變色、變質或塗層剝落。



務必遵守

首次使用或未習慣使用前，請使用 LO 模式。

否則可能會導致意外或受傷。



務必遵守

使用後，務必將主機上的水擦乾。另外，請勿將其放在浴室等高溫潮濕的地方。

在沾濕狀態下閒置本機可能會導致充電端氧化。



禁止

請勿過度用力按壓。

否則可能會導致受傷或故障。如感到任何疼痛或異常，請立即停止使用。



務必遵守

使用時，請務必在裝上配件的情況下使用。

否則可能會纏結及損壞頭髮。



## 警告



務必遵守

請使用100V至240V交流電。

否則可能會導致觸電、火災或故障。



生火注意


使用前請先確認插頭的形狀及電壓。

否則可能會導致發熱、起火或故障。


- 插頭的形狀及電壓會因地域及住宿地方而有異。請先確認後才使用。
- 有關於轉換插頭的事宜，請向經銷商查詢。

# 產品說明

## ●主機

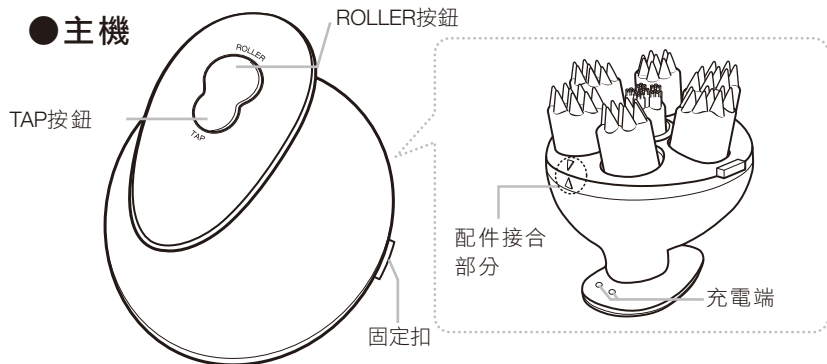

拆下錐形按摩頭後

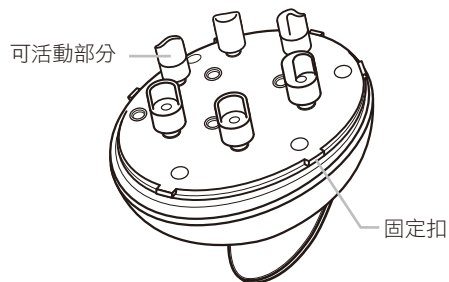

## ●配件


### ·錐形按摩頭

僅限於頭皮上使用。

\* 購買時已安裝在主機上。


### ·揉捏按摩頭

可用於頭皮、臉部、頸部和肩部。

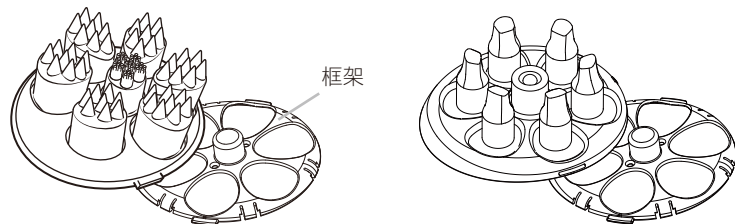

配件的框架是可脫式的。有關安裝框架的方法，請參閱「當配件的矽膠部與框架鬆脫時」(P.13)。

## ·充電座

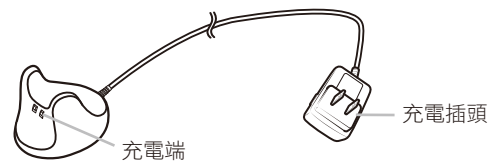

※主機和配件的設計和規格上如有任何更改，恕不另行通知。

## 特點

### ●安全功能

如果配件被過度施壓，可能會引致頭髮纏結或其他危險，此時，安全功能將被啟動，操作會暫時停止。

如果連續用力按壓數次，模式燈可能會閃爍並且自動關閉電源。請以適當的力度使用。

如果電源自動關閉，請再次啟動電源並選擇模式。

### ●防水功能

本機的機身具有防水規格(IPX7)。它可以於淋浴或浴缸中使用。充電底座並不具防水功能。



警告

### ●請勿在浴室內充電。

否則可能會導致觸電、短路或火災。



注意


### ●請勿將其浸於水中或浴缸中。

否則可能會導致主機故障。

## ● 模式和指示燈顯示

### ● 速度指示燈 (ROLLER 模式)

長按ROLLER按鈕(約3秒)，一個速度指示燈點亮，電源開啟(LO模式)。在電源接通的狀態下，每次按下ROLLER按鈕時，速度都會切換。

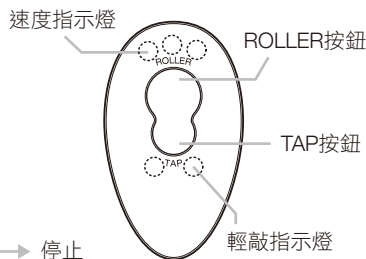

LO (電源開啟) → MID → HI → 停止

	指示燈	說明
LO	●○○○	以較慢的速度移動。首次使用時或熟悉使用方法之前，請使用LO模式。此外，用於臉部時，請使用臉部專用配件，並選擇LO模式。
MID	●●○○	以中等速度移動。
HI	●●●○	快速移動。請於習慣後才使用。
停止	○○○○	停止運作。

### ● 輕敲指示燈 (TAP模式) 可配合振動使用。

TAP 1 → TAP 2 → 停止  
(電源開啟)

長按TAP按鈕約3秒後，一個輕敲指示燈將亮起並開啟電源(TAP1)。在電源接通的狀態下按TAP按鈕則切換至輕敲模式。請根據個人喜好使用。

	指示燈	說明
TAP 1	●○○○	輕柔振動。首次使用或熟悉使用方法前，請使用TAP 1。此外，用於臉部時，請使用脸部專用配件並選擇TAP1。
TAP 2	●●○○	希望增強振動強度的人士，可以使用此模式。
停止	○○○○	停止運作。

※操作開始後約5分鐘會自動關閉電源(自動關機功能)  
ROLLER模式及TAP模式可以分開或同時使用。

## 充電方法

首次使用或電量不足時，請為電池充電。

- 首次充電時，請將電池充滿後再使用。
- 初次使用或長時間閒置時，即使顯示充滿電，也可能只足夠短時間使用。

## ● 預計充電時間

充電時間	運作時間
約3小時	約20分鐘

※充電環境為室溫約 25°C  
※此為充滿電後的運作時間。  
※充電時間和操作時間因電池剩餘電量和充電環境而異。

### 1 將充電插頭插入牆上插座。


### 2 如圖所示將主機放在充電座上，與充電座的充電端接觸。

- 請徹底擦拭主機和充電端上的水滴。
- 如在充電端上殘留水滴的情況下進行充電，可能會損壞產品。
- 充電時，指示燈會根據剩餘電量依次閃爍。
- 充電完成後，所有燈會亮起。
- 充電時間因電池剩餘電量和充電環境而異。



⚠ 注意  
產品擺放方向

指示燈沒有亮起表示並未正常充電。請避免傾斜，將其垂直地放置好。

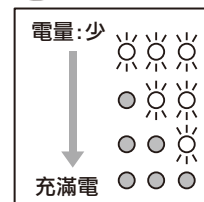

### 3 充電完成後，從插座上拔下充電插頭，並從充電座上取下主機。



警告


- 請務必使用本產品專用的充電座。此外，將充電插頭直接插入牆上插座，不要使用電源拖板。否則可能會導致觸電、短路或火災。
- 充電前請檢查充電端是否沾濕。否則可能會導致觸電、短路或火災。

## 安裝及移除配件的方法

### ● 安裝方法


#### 1 將主機的可活動部分對準配件的裝嵌口。

※將主機和配件上的 △ 標記(P.7)對齊。

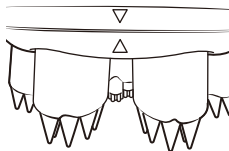

#### 2 插入配件直至聽到咔嗒聲。

- 對齊頂部標記，並固定在六個固定扣上。
- 讓配件與可活動部件的移動方向對齊，會更容易安裝。

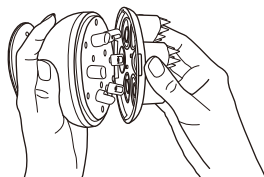


※安裝時注意不要夾到手指。




### ● 移除方法

#### 1 用手指扶住配件的固定扣，並向上提起以拆除底座的膠框架。


※如配件與活動部件分開，請注意不要丟失。此外，請務必將配件安裝到活動部件裝嵌口上使用。

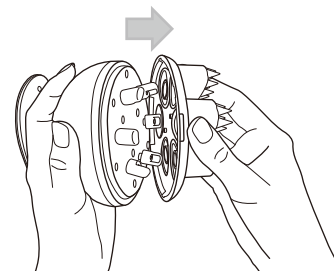

配件上的矽膠部分和透明框架是交疊在一起的。請將兩者一起從主機上拆出。

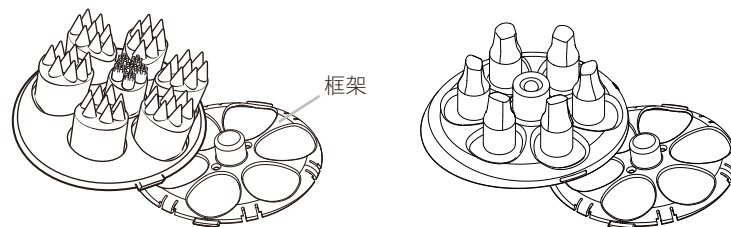

※請注意不要只取下配件的矽膠部分。如不拆除框架則無法更換配件。

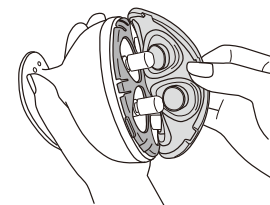





## ●當配件的矽膠部與框架鬆脫時

如果找不到框架，請檢查它是否裝於主機上。

※配件由軟材料製成。強行拉扯可能會撕裂，請小心處理以免損毀。

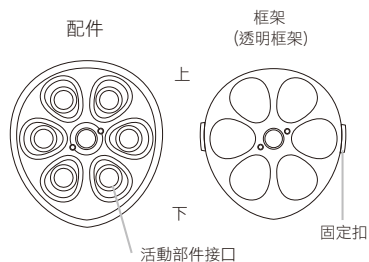

①將配件中心的突起部份與左右的固定扣對齊。將框架放在配件上，如下圖所示將突起部分與固定扣對齊，然後將其推出。

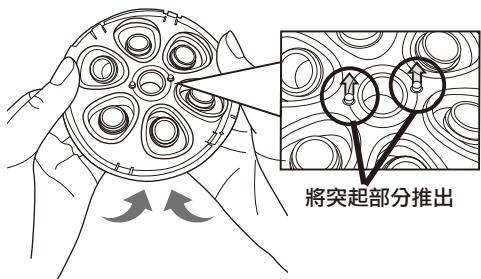


將突起部分推出




將配件中心的突起部分推入框架的開口之中。

②將配件外周的開口部位套於框架上。

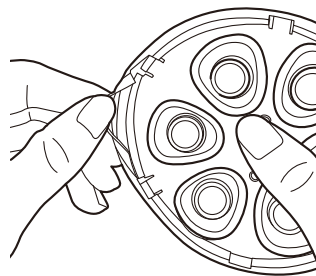


安裝時將配件的邊緣包覆著框架。

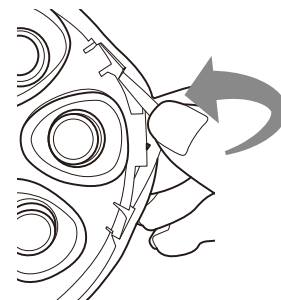


拉開並鉤住兩側的固定扣。

③將主機和配件的箭頭部分對齊，然後插入配件，將配件打開的部份推進去直到聽到“咔嗒”一聲，使其與主機緊緊地連接上。

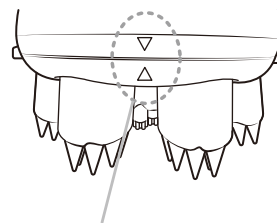

對齊

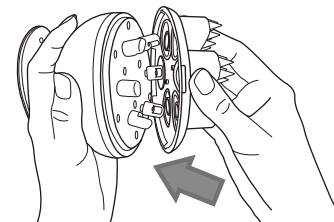

推進去

· 安裝前請檢查配件及框架的正反面及上下方向。配件正面上方有△的標記。





警告

- 頭皮有擦傷、皮膚發炎等異常情況時請勿使用。  
否則可能會導致意外、皮膚或身體出現問題。
- 如感到疼痛、噁心、頭皮或皮膚有任何異常，請立即停止使用。  
萬一頭皮或皮膚出現任何異常時，請立即停止使用並諮詢醫生。



注意

- 使用時，必須安裝配件。
- 在面部使用時，請務必安裝揉捏按摩頭並使用LO模式/TAP 1。
- 以下人士請勿使用。  
可能會因頭髮纏結而導致頭髮受損。
  - 接受過植髮手術的人。
  - 戴假髮或頭髮貼片的人士（用膠貼固定、正使用駁髮造型等）。
- 請勿進行以下動作。  
否則可能會導致意外或出現問題。
  - 請勿用力按壓或快速移動刷子。
  - 請勿集中使用於一個地方。
  - 如果頭髮纏結，請關閉主機並先解開纏結的頭髮。
- 請遵照建議使用時間使用。以下為建議使用時間。  
過度使用會損害皮膚和頭皮。
- 使用前，請先清洗頭髮和頭皮確保沒有殘留洗髮或護理產品。  
否則可能會導致主機變色、變質或塗層剝落。
- 請勿在含有入浴劑的熱水或溫泉中使用。萬一主機被浸濕，請用水徹底沖洗。  
否則可能會導致異味、變色或故障。
- 請勿過度用力按壓。  
如感到任何疼痛或異常，請立即停止使用。

### 建議使用時間

- 請每個部位每次使用約5分鐘，建議每天使用共20分鐘。  
使用於臉部時，全臉使用約5分鐘，使用於頭皮時，整個頭皮使用約5分鐘。  
過度使用會損害皮膚和頭皮。

### 1 用洗髮水塗抹整體頭髮至起泡。

- 請勿與其他頭皮刷一起使用，否則可能會造成過度護理。





### 2 如圖所示握住主機。

- 請牢牢握住以免主機掉落。



### 3 按住按鈕（約3秒）開啟電源並選擇所需的模式。

- 每按一次按鈕時都會切換形式。  
（請參閱P.9的模式和指示燈顯示）
- 首次使用時，請使用LO模式 / TAP 1。
- 為了讓整個配件可以接觸到頭皮，請輕輕地垂直按壓。

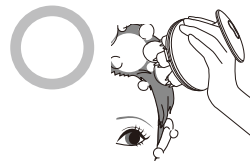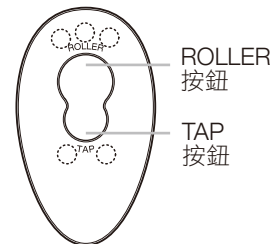

讓整個按摩頭接觸頭皮



有一部分按摩頭未接觸到頭皮

## 4 護理前頭部和兩側。

- ① 輕按髮際線位置約5秒。
- ② 用約5秒從髮際線位置輕輕移到頭頂。
- ③ 重複①和②兩次。


· 如用力按壓配件，可能會啟動安全功能並自動關閉電源。

請使用適當力度按壓。



## 5 護理頭部後方。


- ① 輕按髮際線位置約5秒。
- ② 用約5秒從髮際線位置輕輕移到頭頂。

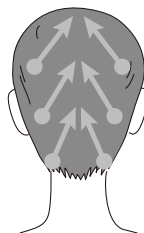

## 6 護理頭頂及頭部後方。


用約20秒輕按頭頂（右圖Ⓐ）。

如右圖所示，用約5秒從頭頂向頸部按壓及滑行移動。

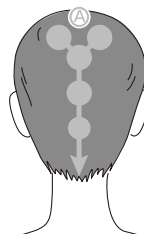

## 7 護理完成後，長按住按鈕（約3秒）關閉電源。

- 指示燈熄滅，電源關閉。
- 即使沒有長按按鈕，電源也會在開始運作約5分鐘後自動關閉。

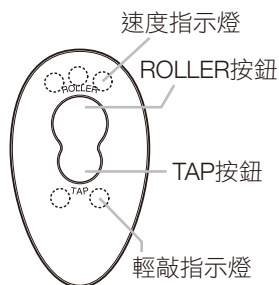

## 8 沖洗掉洗髮水並進行正常護理。

- 洗掉洗髮水後，照常護理頭髮。  
(護髮素、修護液、髮膜等)



注意

- 如使用洗髮水或頭皮修護液，請務必用水清洗。否則可能會導致主機變色、變質或塗層剝落。

## 輪廓線護理

### 必需使用揉捏按摩頭，並且使用LO模式/TAP1


建議在皮膚濕潤狀態下使用。

建議在沐浴時或用爽膚水或精華潤濕皮膚後使用。

建議卸妝後使用。


### 1 如圖所示握住主機。

- 請牢牢握住以免主機掉落。

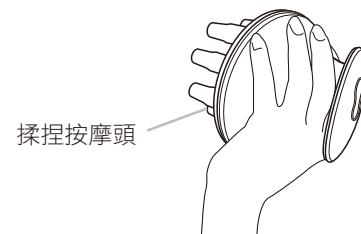


### 2 按住按鈕（約3秒）開啟電源必需選擇LO模式/TAP1。

- 將配件垂直輕輕按於皮膚上。
- 請勿用力按壓。

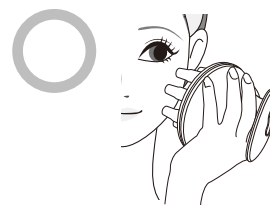

讓整個配件垂直於貼住皮膚

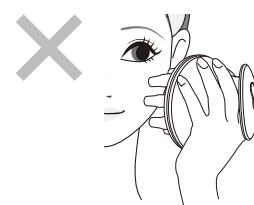

有一部分配件未能接觸到皮膚

### 3 護理臉部。

從下巴和額頭沿著臉部輪廓線輕輕滑到太陽穴。  
各重複10次。

- 如用力按壓配件可能會啟動安全功能並自動關閉電源。  
請將它輕輕貼於皮膚上使用。

※避免貼近眼睛和顴骨周圍位置。

※用力按壓附件可能會因皮膚被夾而感到劇烈疼痛。  
在這種情況下，請輕輕按壓並以感覺舒適的力度使用。



※使用潔面霜後請務必先用清水徹底沖洗後再使用。



請勿在眼睛周圍或顴骨上使用

### 4 護理肩膀。

- ① 從耳後方向鎖骨方向以每位置按壓約5秒的速度移動。
  - ② 從鎖骨下方向肩膀方向以每位置按壓約5秒的速度移動。
  - ③ 重複①、②三次。
- ※ 滑動時避免碰到喉嚨和鎖骨。
- ④ 如右圖所示移動本產品，按壓頸後側和肩膀周圍。

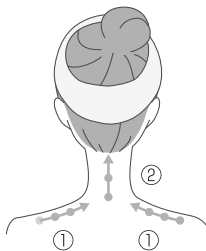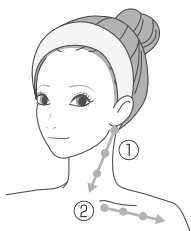

- 按壓
- ➔ 按箭頭方向移動

### 5 護理完成後，長按住按鈕(約3秒) 關閉電源。

- 指示燈熄滅，電源關閉。
- 即使沒有長按按鈕，電源也會在開始操作約5分鐘後自動關閉。



注意

- 使用在臉部時，請必需使用揉捏按摩頭，並且使用LO模式/TAP使用針刷頭或使用MID或HI可能會造成傷害。

### 頭皮按壓護理

#### 與頭皮修護液一併使用時

使用生髮劑等頭皮修護液時，請將頭皮修護液塗抹在頭皮上，徹底吸收後，再使用本產品。

※使用頭皮修護液後，請務必用水徹底沖洗本機。

#### 1 塗抹頭皮修護液在頭皮上



#### 2 如圖所示握住主機。

- 請牢牢握住以免主機掉落。



### 3 長按按鈕(約3秒)打開電源並選擇個人喜好的活動模式。

- 每按一次按鈕，活動模式就會切換。
- 首次使用時，請從LO模式/活動模式1開始。
- 為了讓整個頭部可接觸到配件，請輕輕垂直按壓。



垂直地讓整個按摩頭接觸頭皮



有一部分按摩頭未接觸到頭皮

### 4 護理頭部兩側。


- ① 輕按於髮際線上約5秒。
  - ② 從髮際線緩慢滑行到頭頂(約5秒)。
  - ③ 重複①②步驟兩次。
- 如用力按壓配件，可能會啟動安全功能並自動關閉電源。請以合適的力度貼於皮膚上使用。



● 按壓  
→ 按箭頭方向移動


### 5 護理頭部後方。

- ① 輕按於髮際線上約5秒。
- ② 輕按於中間位置上約5秒。
- ③ 輕按於頭頂位置約5秒。
- ④ 轉換左右位置，重複①至③兩次，讓整個後方頭部也得到護理。

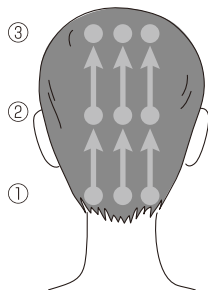

### 6 護理頭頂位置。

- ① 輕按於髮際線上約5秒。
- ② 輕按於頭頂位置約5秒。
- ③ 轉換左右位置，重複①至②兩次，讓整個頭頂位置也得到護理。

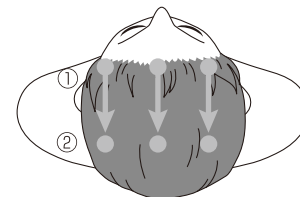

● 按壓  
→ 按箭頭方向移動

### 7 護理完成後，長按住按鈕(約3秒)關閉電源。

- 指示燈熄滅，電源關閉。
- 即使沒有長按按鈕，電源也會在開始操作約5分鐘後自動關閉。



注意

●如使用洗髮水或頭皮修護液，請務必用水清洗。否則可能會導致主機變色、變質或塗層剝落。

### 各部位的模式選擇方法

- ※請根據個人喜好選擇出各種組合模式。
- ※請務必遵守各部分的建議使用模式。

	頭皮	臉部	頸/肩膀
ROLLER	LO MID HI	僅可使用LO	LO MID HI
TAP	TAP1或2	僅可使用TAP1	TAP1或2

## 清潔方法

為保持主機清潔，請每次使用後進行清潔。



不使用或進行清潔時，請務必先關閉電源。  
否則可能會導致觸電、短路或火災。

### 1 確保電源已關閉。

### 2 沖洗掉主機上的毛髮和污垢。

- 請勿使用鹼性洗滌劑、酒精、稀釋劑、汽油或洗甲水清潔。




### 3 從機身上拆除配件。


- 有關配件的拆除方法，請參閱“拆除方法”(P.12)。

### 4 從框架上拆除配件。

- ※由於配件由軟材料製成，強行拉扯可能會撕裂，請小心處理以免損毀。

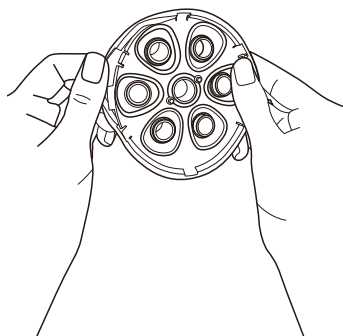

### 5 用溫和洗潔液清洗配件和框架上的污垢後，再用水洗淨。

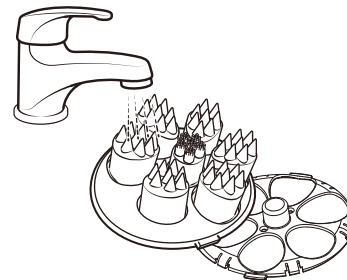


### 6 使用毛巾等乾布擦去主機、配件和框架殘留的水分，並放在通風良好的地方風乾。

- 請用棉棒等擦拭充電端，以免留下水分。
- 請勿讓本機在潮濕狀態下閒置。

### 7 將框架安裝到配件上。

- 如找不到框架，請檢查它是否已裝在主機上。
  - 有關如何安裝框架的說明，請參閱“當配件的矽膠部與框架鬆脫時”(P.13)。
- ※由於配件由軟材料製成，強行拉扯可能會撕裂，請小心處理以免損毀。

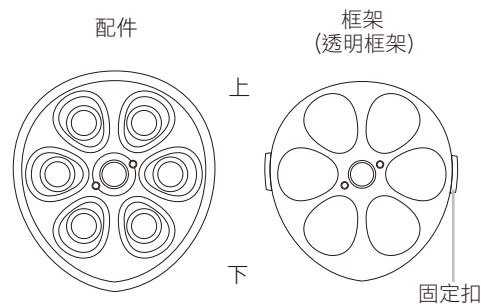

## 檢查項目

如在使用時感到任何異常，請檢查以下症狀。

狀況	可能的成因	解決方法
無法開機	沒有按ROLLER 按鈕或TAP按鈕	長按任何按鈕(約3秒)開啟電源
	沒有充電	使用牆上插座給電池充電(P.10)
充電後，仍只能運作數分鐘	電量不足	請聯繫經銷商 *請勿自行更換電池。
	充電電池可能已達到其使用壽命	
無法充電	充電插頭未插入插座中	將充電插頭完全插入插座中
	主機沒有穩固地放置充電座上	擦去充電端上的水分，將主機放在充電座上，並連接充電端。
突然停止運作	電量不足	請充電(P.10)
	自動關機功能啟動	操作約5分鐘後自動停止(P.9)
	安全功能啟動	當配件受到強力按壓或頭髮纏結時，安全功能會啟動



## 注意

- 請勿將產品放置在水中或浴缸中浸泡。否則可能會導致主機出現故障。
- 使用洗髮水或頭皮修護液時，請務必用水清洗。否則可能會導致主機變色、變質或塗層剝落。
- 請勿在含有入浴劑的熱水或溫泉中使用。萬一主機被浸濕，請用水徹底沖洗。否則可能會導致異味或變色。
- 使用後，務必將主機上的水擦乾。另外，請勿將其放在浴室等高溫潮濕的地方。在沾濕狀態下閒置本機可能會導致充電端氧化。

## 保存方法

- 使用後，請務必擦去水分並徹底風乾後再存放。機身殘留水分狀態下存放可能會導致充電端和主機內部受損。
- 長期閒置本產品時，請先清潔主機才存放。
- 不使用時請關閉主機電源並從插座上拔下充電插頭再存放。
- 請勿將產品放置在火源附近、烈日下或浴室等高溫潮濕的地方。請存放在清潔、通風良好的地方。
- 請存放於兒童接觸不到的地方。

## 保養

- 本產品長時間閒置後再次使用時，請務必確認它正常且安全運作後再使用。
- 如果在操作本產品時遇到問題，請在要求維修前先參閱“排除故障”(P.26)並檢查症狀。如果仍不能解決問題，請聯繫經銷商。
- 如本產品出現故障或損壞，請聯繫經銷商。

## 常見問題

Q	A
我應該多久使用一次？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請每個部位每次使用約5分鐘，建議每天使用共20分鐘。使用於臉部時，全臉使用約5分鐘，使用於頭皮時，整個頭皮使用約5分鐘。過度使用會損害皮膚和頭皮。</li> <li>●如果感覺皮膚或頭皮有任何異常，請立即停止使用。</li> </ul>
我可以在乾髮上使用嗎？	可以。
可以在頭皮以外的地方使用嗎？	可以使用。 在臉部使用時，請務必安裝揉捏按摩頭並設置LO模式/TAP 1。
我無法順利安裝配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請檢查透明框架(框架)是否已安裝在矽膠部分上。</li> <li>●如果矽膠部分從框架上脫落，請將(矽膠部分)覆蓋框架並將其安裝到主機上。(P.13)</li> <li>●如果仍然難以安裝配件，請將可活動部件對準，然後按下電源按鈕打開電源。(LO模式)。配合可活動部分的動作將配件與主機對齊，會更容易安裝。</li> </ul> <p>※安裝時注意不要夾到手指。</p>
我無法順利拆除配件	用手指扶住配件左側或右側的固定扣，並取出底座的膠框架。(參見“安裝及移除配件的方法”(P.12)。)
在浴缸中使用時會出現氣泡	這並非故障。
在浴缸中使用後，搖動主機時，會聽到進水的聲音。	這是正常的。 請徹底抹去主機和配件上的水分，並在通風良好的地方風乾(參見“清潔方法”(P.23-24))。

## 售後服務

### 充電電池

- 充電池屬消耗品(不屬於保養範圍內)。
- 充電後的操作時間變短,表示電池壽命可能快將結束。電池大約可以充電300次。
- 如需更換電池，請聯絡經銷商。

### 棄置

- 請遵照當地政府規定棄置產品。
- 本產品使用鋰離子電池。



Li-ion



## ● 產品規格

額 定 輸 入	DC5V 500mA
功 率	約 3W (充電時)
外 形 尺 寸	主機：約 W97 x D105 x H103 mm (配件除外) 電線長度：約 1.1m
重 量	主機：約287g (配件除外)
材 質	主機：ABS樹脂、聚碳酸酯及聚縮醛 配件：矽及聚碳酸酯 充電座：ABS樹脂
生 產 地	中國
配 件	主機 ..... 1個 錐形按摩頭 ..... 1個 揉捏按摩頭 ..... 1個 充電座 ..... 1個